


- ⚠ **WARNING:** Important! Read and understand these instructions before installing or using the Lumex Walker Tray. If you do not understand any part of these warnings or instructions, contact a healthcare professional for direction in the use of this product. If the Walker Tray is not properly installed, personal injury and damage to the Walker Tray could result.
- ⚠ **WARNING:** If components are damaged or missing, contact your GF distributor immediately. DO NOT use substitute parts. Use only Lumex replacement parts.
- ⚠ **WARNING:** GF Health Products, Inc. assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper assembly, installation or use of this product.

INSTALLATION (REFER TO PICTURE)

- ⚠ **WARNING:** Before installing the Walker Tray, ensure the walker is completely unfolded and locked in open position.

1. With the Walker Tray in a collapsed position between the brackets, face the front of the walker. Grasp the Walker Tray by the sides and clamp the brackets onto the walker's front frame, positioning the lower clamps on top of the walker's lower cross brace.
2. Ensure the Walker Tray's lower clamps are resting on the walker's lower cross brace and all four clamps are securely attached.
3. Pull the Walker Tray out with your thumb and the tips of your fingers; rotate it upward and lock it into place, as shown at right.

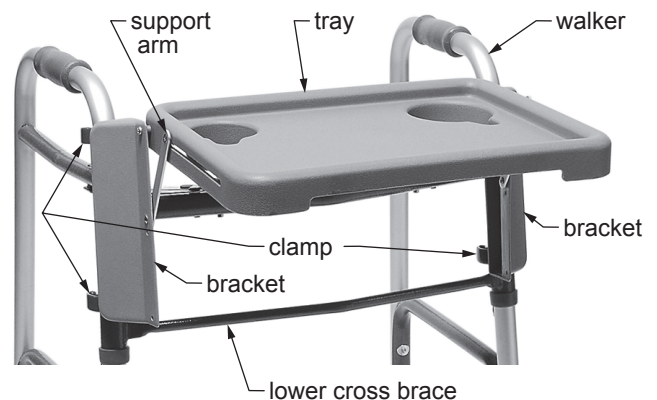

603900A Walker Tray

- ⚠ **WARNING:** Ensure the Walker Tray is securely installed as instructed before use.

4. When the Walker Tray is no longer in use, lift it up, push in on the tops of both support arms while pushing the tray forward, and rotate the tray down.

OPERATION

- ⚠ **WARNING:** Pinch point—do not place your hand or fingers between the tray and the bracket.

MAINTENANCE / CLEANING

To remove dust and dirt, wipe the Walker Tray gently with a clean, soft, damp cloth. To clean it, use a clean, soft cloth and a mild soap and water solution, rinse with clear water, then dry with a soft cloth.

- ▲ **NOTICE:** DO NOT use solvents, abrasive cleaners, or scouring pads to clean this product.

LIMITED WARRANTY

SCOPE OF WARRANTY

GF Health Products, Inc. ("GF") warrants to the original purchaser only that it will replace or repair components, at GF's sole discretion, that are defective in material or workmanship under normal use and service. All warranties are conditioned upon the proper use of the products strictly in accordance with good commercial practice and applicable GF instructions and manuals, including proper use and maintenance. To the extent that a third party warrants a component, GF conveys all of its rights under that warranty to the original purchaser, to the extent permitted. This limited warranty of 1 (one) year.

This limited warranty shall only apply to defects that are reported in accordance with the provisions set forth in this warranty document, within the applicable warranty period and which, upon examination by GF or its authorized representative, prove to be a warranty item. (See Obtaining Warranty Service below) This limited warranty is not transferable.

The applicable warranty period shall commence from date of shipment to the original customer, unless there is an expiration date on the component in which case the warranty shall expire on the earlier of warranty period or the expiration date.

OBTAINING WARRANTY SERVICE

Customers located in the United States who wish to report a warranty issue, must contact GF directly by calling 1.770.368.4700 or by e-mailing a request to cs@grahamfield.com. Customers located outside the United States must contact the Distributor from whom they purchased the products. In both cases, further directions will be provided once the initial contact is made. This limited warranty shall only apply to defects that are reported within the applicable warranty period. Failure to abide by the specific directions will result in denial of the warranty claim.

EXCLUSIONS

The warranty does not cover and GF shall not be liable for the following:

- 1) Defects, damage, or other conditions caused, in whole or in part, by misuse, abuse, negligence, alteration, accident, freight damage, tampering or failure to seek and obtain repair or replacement in a timely manner;
- 2) Products which are not installed, used, or properly cleaned and maintained as required in the official manual for the applicable product;
- 3) Products considered to be of a non-durable nature including, but not limited to: filters, fuses, gaskets, lubricants, and charts;
- 4) Accessories or parts not provided by GF;
- 5) Matching of color, grain or texture except to commercially acceptable standards;
- 6) Changes in color caused by natural or artificial light;
- 7) Charges by anyone for adjustments, repairs, replacement parts, installation or other work performed upon or in connection with such products which are not expressly authorized in writing, in advance, by GF;
- 8) Any labor or shipping charges incurred in the replacement part installation or repair;
- 9) Costs and expenses of regular maintenance and cleaning; and
- 10) Representations and warranties made by any person or entity other than GF.

ENTIRE WARRANTY, EXCLUSIVE REMEDY AND CONSEQUENTIAL DAMAGES DISCLAIMER

THIS WARRANTY IS GF'S ONLY WARRANTY AND IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. GF MAKES NO IMPLIED WARRANTIES OF ANY KIND INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IF ANY MODEL OR SAMPLE WAS SHOWN TO THE CUSTOMER, SUCH MODEL OR SAMPLE WAS USED MERELY TO ILLUSTRATE THE GENERAL TYPE AND QUALITY OF THE PRODUCT AND NOT TO REPRESENT THAT THE PRODUCT WOULD NECESSARILY CONFORM TO THE MODEL OR SAMPLE IN ALL RESPECTS. THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PARTS. GF SHALL NOT BE LIABLE FOR AND HEREBY DISCLAIMS ANY DIRECT, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, EXEMPLARY OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO: DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS OR INCOME, LOSS OF USE, DOWNTIME, COVER, OR EMPLOYEE OR INDEPENDENT CONTRACTOR WAGES, PAYMENTS AND BENEFITS. CERTAIN STATES MAY CONFER ADDITIONAL RIGHTS REGARDING WARRANTIES AND IN THOSE STATES GF'S LIABILITY AND THE LIABILITY OF GF'S SUPPLIERS, SHALL BE LIMITED TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW.

The warranties contained herein, together with GF's current Terms and Conditions, contain all the representations and warranties with respect to the subject matter of this document, and supersede all prior negotiations, agreements and understandings with respect thereto. The recipient of this document hereby acknowledges and represents that it has not relied on any representation, assertion, guarantee, warranty, collateral contract or other assurance, except those set out in this document.

For additional information on this product or this warranty, please contact a GF Customer Service Representative..

NOTES:

- 1) Additional terms and conditions may apply. See GF's General Terms and Conditions on its website: www.grahamfield.com.
- 2) Freight claims must be notated on the appropriate shipping documents and must be made with immediacy. International, federal and state regulations govern specific requirements for freight claims. Failure to abide by those regulations may result in a denial of the freight claim. GF will assist you in filing the freight claim.
- 3) Claims for any short shipment must be made within three (3) days of the invoice date.

LUMEX[®]
by graham-field

Manufactured For:
GF Health Products, Inc.
One Graham-Field Way, Atlanta, GA 30340
Made in China



+1 770.368.4700

Information contained herein is subject to change without notice.
The most current and complete product information can be found on our website.
www.grahamfield.com

graham
field

- ⚠ **ADVERTENCIA:** ¡Importante! Lea y entienda estas instrucciones antes de instalar o utilizar el Lumex Bandeja para Andador. Si no entiende cual quiere parte de estas advertencias o instrucciones, llame a profesional de cuidado de salud para dirección en como utilizar este producto. Si el Bandeja para Andador no está instalado en la manera correcta, herida personal o daños a la propiedad puede ocurrir.
- ⚠ **ADVERTENCIA:** Aviso para los clientes de California - Proposición 65 de California
ADVERTENCIA: Este producto contiene una sustancia química conocida en el estado de California por causar cáncer y daños reproductivos o del desarrollo.
- ⚠ **ADVERTENCIA:** GF Health Products, Inc. no asume responsabilidad alguna por daños o heridas causadas por ensamblaje incorrecto de este producto.

INSTALACIÓN (REFIÉRASE A LA FOTO)

- ⚠ **ADVERTENCIA:** Antes de instalar la Bandeja para Andador asegúrese de que el andador está completamente abierto y fijado en la posición abierto.

1. Con la Bandeja para Andador en su posición colapso dentro de los soportes, póngalo en la parte del frente del andador. Agarre la Bandeja para Andador por los lados y ponga los soportes en el marco del andador, posicionando las abrazaderas de abajo encima del apoyo cruzado inferior del andador.
2. Asegúrese de que las abrazaderas inferiores de la Bandeja para Andador están encima en el apoyo cruzado inferior del andador y que todas las abrazaderas están fijados seguros.
3. Jale la Bandeja para Andador con su dedo pulgar y las puntas de sus dedos; rotarlo hacia arriba y que esté fijado, como enseñado a la derecha.



603900A Bandeja para Andador

- ⚠ **ADVERTENCIA:** Asegúrese de que la Bandeja para Andador está seguramente instalado como instructado antes de uso.
4. Cuando la Bandeja para Andador no va estar en uso, levántelo, empuje hacia dentro en los soportes en los lados de la bandeja y empuja la bandeja delante y rotéalo abajo.

OPERACIÓN

- ⚠ **ADVERTENCIA:** No debe poner su mano o dedos entre la bandeja y los soportes.

LIMPIANDO / MANTENIMIENTO

Para eliminar el polvo y la suciedad, limpie el Bandeja para Andador suavemente con un paño limpio, suave y húmedo. Para limpiar, utilice un suave paño limpio y un jabón suave y agua, enjuague con agua limpia, y seque con un paño suave.

- ▲ **AVISO:** NO utilice solventes, limpiadores abrasivos, o estropajos para limpiar este producto.

GARANTÍA LIMITADA

ÁMBITO DE GARANTÍA

GF Health Products, Inc. ("GF") garantiza al comprador original o arrendatario (cual quiera es el "Cliente") solamente, que va reemplazar o reparar componentes, a la decisión solo de GF, cuales son defectos en material o calidad utilizado normalmente y con servicio. Todas garantías son condicionales por el uso apropiado de los productos en acuerdo con practicas de buen negocio y aplicable con los instrucciones y manuales de GF, incluyendo uso apropiado. A la medida que un tercer parte garantiza un componente, GF transmite todos nuestros derechos debajo esa garantía al Comprador Original, a la medida permitido. El comprador original es el quien compra este product nuevo y no usado por GF o un Distribuidor Certificado. Esta garantía limitado de 1 año.

Esta garantía limitada solamente se aplica por los defectos reportados en conformidad con los proviciones estabalizados en este garantía documento, dentro del period de garantía aplicable y cual con examinacion por GF o su representante autorizado, da prueba del producto en garantía. (lea Obteniendo Servicio de Garantía abajo). Esta garantía limitada no es transferible.

El periodo de garantía se comienza en la fecha de transporte al Cliente a menos que haya una fecha de expiración en el componente en cual la garantía se expira en la periodo de garantía o la fecha de expiración.

OBTENIENDO SERVICIO DE GARANTÍA

Comunicase con el Distribuidor de donde compraste el producto. Si no hay Distribuidor, debes llamar a GF directamente llamando 678-291-3207, mandando fax a 1-770-368-2386 o por email a cs@grahamfield.com. Direcciones especificos se van a dar por el Representante de Servicio De Clientes. Falla de seguir las direcciones especificos se resultara en negacion de su reclamacion de garantia.

EXCLUSIONES

La garantía no cubre y GF no será responsable de lo siguiente:

- 1) Defectos, daños u otras condiciones causadas, en su totalidad o en parte, por el mal uso, abuso, negligencia, alteración, accidentes, daños durante el transporte, manipulación indebida o dejar de solicitar y obtener la reparación o el reemplazo de una manera oportuna;
- 2) Productos que no se instalen, utilicen, limpien y mantengan de manera apropiada, como se requiere en el manual oficial aplicable para el producto;
- 3) Productos que se consideran que no son de naturaleza duradera, incluyendo, pero sin limitarse a: puntas, filtros, fusibles, juntas, lubricantes, y gráficos;
- 4) Accesorios o piezas no suministradas por GF;
- 5) Pareo de color, grano o textura except a los aceptables por los normas
- 6) Cambios en color causado or luz natural o artificial
- 7) Cargos por concepto de ajustes, reparaciones, piezas de recambio, instalación u otro trabajo realizado en o relacionados con tales productos que no estén autorizados expresamente por escrito, de antemano, por GF;
- 8) Cualquier gasto de mano de obra o de envío que se incurra en la instalación de la pieza de reemplazo o la reparación;
- 9) Costos y gastos del mantenimiento y limpieza regular; y
- 10) Representaciones y garantías hechas por cualquier persona o entidad que no sea GF.

GARANTÍA ENTERO, REMEDIO EXCLUSIVO Y DESCARGO DE DAÑOS CONSIGUIENTE

ESTA GARANTÍA ES LA UNICA GARANTÍA DE GF Y ES EN VEZ DE TODAS OTRAS GARANTÍAS, EXPRESIDAS O IMPLICITADAS. GF NO HACE GARANTÍAS ENTENDIDOS DE CUALQUIERA MANERA INCLUYENDO GARANTÍAS ENTENDIDOS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PREPÓSITO PARTICULAR. SI UN MODELO Y MUESTRA SE LE ENSEÑA A UN CLIENTE, TAL MODELO O MUESTRA FUE UTILIZADO SOLAMENTE PARA ILUSTRAR EL TIPO GENERAL Y CALIDAD DEL PRODUCTO Y NO PARA REPRESENTAR QUE EL PRODUCTO SE CONFORME CON ESE MODELO Y MUESTRA EN TODOS RESPETOS. TODA RESPONSABILIDAD DE GF POR CUALQUIER PRODUCTO Y SERVICIO PROVEÍDO ES LIMITADA AL COSTO DEL PRODUCTO EN LA RECLAMACIÓN. EN NO EVENTO EN CONTRATO, INDEMNIZACIÓN, GARANTÍA, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD ESTRUCTA O OTRO QUE GF SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO DIRECTO, ESPECIAL, INDIRECTO, INCIDENTAL, EJEMPLAR O CONSIGUIENTES INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A: DAÑOS PARA PERDIDA DE BENEFICIO O GANANCIA, PERDIDA DE USO, INACTIVO, O SALARIOS DE EMPLEADOS O TRABAJADORES CONTRACTORES, PAGOS O BENEFICIOS. ALGUNOS ESTADOS Y PAISES PUEDEN CONFERIR DERECHOS ADICIONALES SOBRE GARANTIAS Y EN ESOS INSTANTES LA RESPONSABILIDAD DE GF Y LA RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES DE GF SERAN LIMITADO A LA MEDIDA MAXIMO PERMITIDO POR LA LEY.

Las garantías contenidos, juntos con los Terminos y Condiciones de GF, contienen todo la representaciones y garantías con respecto a sujeto de este document, y reemplaza cual quier negaciones, contratos de antes. El beneficiario de este document reconoce y representa que no haya fijado en otro representacion, afirmacion, garantia, collateral o contrato solamente en los de este document.

Por informacion adicional en este producto o garantia, por favor de comunicarse con un Representante de Servicio de Consumidor de GF.

NOTAS:

- 1) Se pueden aplicar términos y condiciones adicionales. Lea los Terminos y Condiciones de GF en la pagina de web www.grahamfield.com
- 2) Las reclamaciones de flete se deben anotar en los documentos de embarque apropiados y deben hacerse con inmediatez. Los requisitos especificos para las reclamaciones de fletes se rigen por regulaciones internacionales, federales y estatales. El incumplimiento de estas regulaciones podría resul tar en la denegación de la reclamación de flete. GF le ayudará en la presentación de la reclamación de flete.
- 3) Las reclamaciones de embarques con faltantes se deben realizar en un plazo de tres (3) dias de la fecha de la factura.



Fabricado para
GF Health Products, Inc.
One Graham-Field Way, Atlanta, GA 30340
Fabricado en China



+1 770.368.4700

Inf La información contenida en este documento está sujeta a cambios.
La información más actualizada y completa del producto se van a encontrar en nuestra página web.
www.grahamfield.com

